

可移动地板


通过一个可移动地板将泳池改变成任意深度



WATER PERMEABLE SURFACE

Pool water can move **through the surface** undisturbed, because of openings between the tiles. Therefore:

- ♥ Optimal water hygiene
- Undisturbed water circulation
- ⌚ The floor moves faster through the water

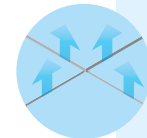

WATER HYDRAULICS

Water hydraulic cylinder means zero risk of contamination with toxic fluids

MINIMUM CONSTRUCTION THICKNESS

A total construction thickness of 30 cm, this is the thinnest movable floor in the market.

MAXIMUM ADAPTABILITY

- Underwater treadmill
- Underwater bicycle
- Obstacle course
- Camera's
- Counter current
- Underwater massage
- Self adjusting steps

SAFE

- Strong stainless steel frame
- Safe non-slip surface
- Water permeable over entire surface
- Safe water hydraulics

DYE TEST

Only movable floor that passes the EN15288-2:2008 annex A Dye test

QUALIFICATIONS

- Certified as Class I Medical Device (MDD)
- ISO 9001:2015 Certified manufacturer
- ISO 13485:2012 Qualified supplier

RETRO FITTING POSSIBLE

Can be installed in new and existing pools

Additional advantages

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ready for use in 1 week | Optimal water hygiene | 25+ years lifespan |
| Single point of contact | Easy maintenance | 80% recyclable materials |
| No toxic fluids | 800+ projects worldwide | |

EWAC Medical
Dulleweg 18
1721 CT Langedijk
The Netherlands

EWAC MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

www.ewacmedical.com

EWAC MEDICAL
We get you moving

可移动的水下锻炼地板



我们认为在水中康复训练中，一个治疗师应该为病人创造一个最佳的锻炼环境，而水的深度是一个十分重要的因素。

这就是为什么我们研发出可移动泳池地板的原因。该移动地板专为医疗使用设计。我们的地板透水性能极佳，我们的可移动池地板是目前市面上最卫生的。而这一点对脆弱的患者尤为重要。

在水疗中治疗师应该选择适合病人的水的深度。年龄、身高和康复进度相对于其他因素在决定正确的运动深度中起着十分重要的作用。通过我们的可移动泳池地板，按下按钮就可改变水的深度。地板可以很快地升到地面上，这样病人就可以很方便地进出游泳池。



功能多样

EWAC医疗器械公司的可移动泳池地板是目前市场上最多功能的产品。该产品适用于任何游泳池，以及任何尺寸。即使在现有的游泳池里也可以用可移动地板来重新改装。它可以配备一个pooltrack®一体的水下跑步机，从而可以让病人平稳地进行行走练习。同时，我们还提供许多行走和骑自行车练习的配件。

新水池里可以装配照相机和水下照明系统，以及急流、逆流和水下按摩系统，这将大大增加治疗师治疗的可能性。

有了这个没有任何繁重的施工工作多动能组合泳池，我们甚至可以在您那快速地组装出泳池。同时，这意味着您将通过一个产品轻松拥有一整套水疗的方案。



卫生

我们的可移动地板系统符合关于水卫生的最严格的规定。事实上，它是目前市场上唯一符合欧洲EN 15288:2008附件A染料实验要求的产品。这就意味着在水经过适当消毒的情况下，可移动地板的存在不会影响水池中的水循环。



安全

我们的可移动地板有一个坚固的AISI 316 L不锈钢建造的框架，并且表面是安全防滑聚酯。水一直都可以穿过整个表面，均匀地把循环的水撒到泳池。



安全的水液压

地板的运动是通过安全水液压实现的。与油压系统相比，它为泳池水提供了前所未有的保护，使得游泳池中的水免受有毒的液压液的污染。



维护简单

系统中的所有机械部件都可以很轻松的从地板表面获取。仅移除一小部分面板就可完成清洁工作。与市场上的其他产品不一样的是，您没有必要雇用专业潜水队对可移动地板进行维护。



环境友好型

我们使用的材料中超过80%的都是可循环利用的材料。与此同时，如果夜间将其放置在地面上，可移动的地板还可以保持能量，因为它可以防止水的蒸发以及热辐射。这样它就可以减少热量损失，从而减少二氧化碳排放。



配件

可移动地板有一系列有用的配件，这些配件可以使病人更快地康复，并且给治疗师提供了多样选择，从而可以加快病人康复的进程并且增加康复过程中的趣味性。



运动配件：

- pooltrack®水下跑步机
- 水下自行车
- 障碍
- 可拆卸双杠
- 扶手



训练配件：

- 蛙鞋
- 水哑铃
- 游泳浮管



进入泳池方式

- 自适应楼梯（根据可移动地板的深度调整步伐大小）
- 平缓的坡道（方便轮椅进出）



病人触摸配件

- 隔板升降器
- 可移动的椅子
- 延伸器/拉伸器
- 泳池升降机



根据ISO 9001:2015和ISO 13458:2012，EWAC医疗器械公司通过劳氏质量认证。EWAC医疗器械公司有权根据《欧洲医疗器械方针》设计、生产以及测试I类医疗产品。

EWAC Medical is certified according to:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

by Lloyd's Register Nederland

