




Tratamiento de agua

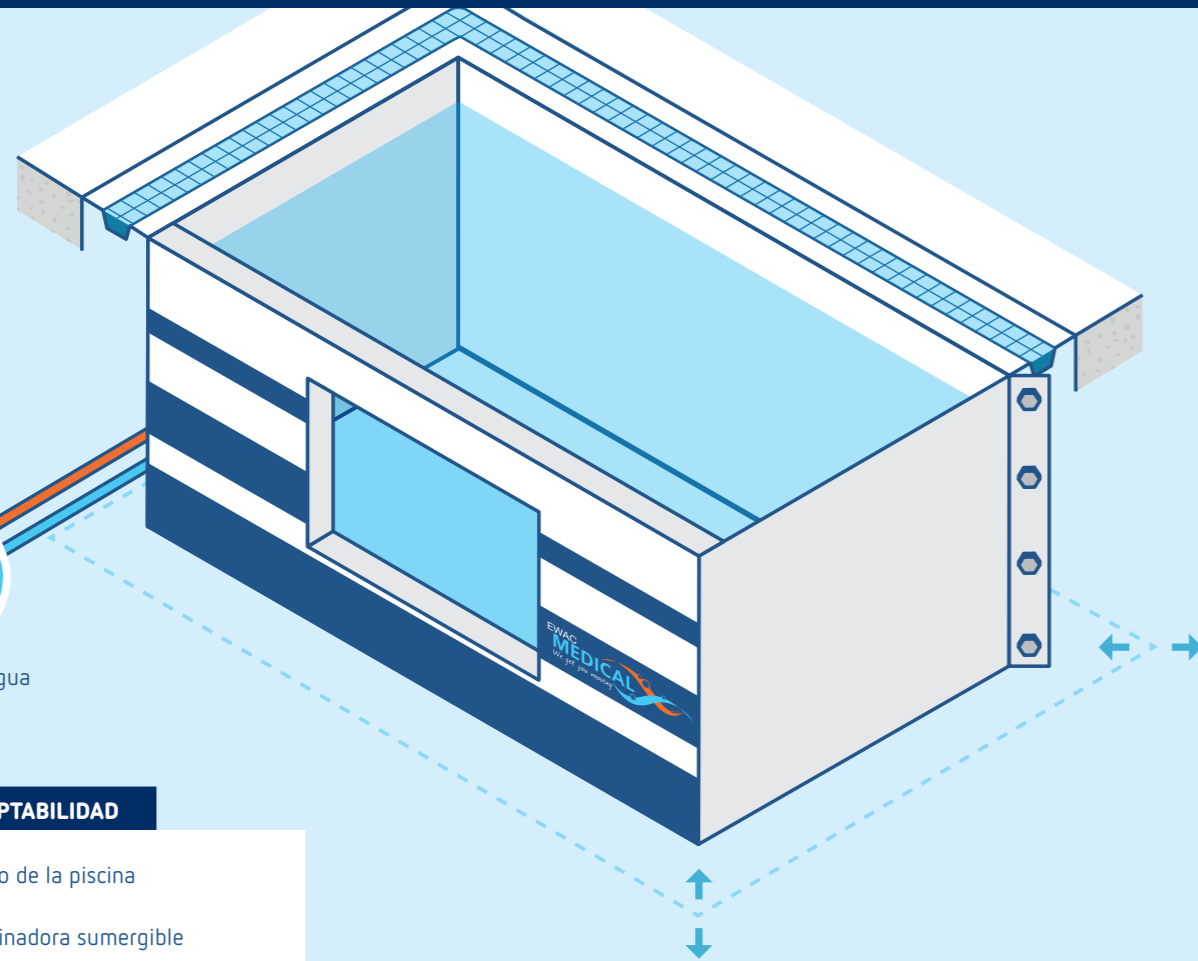

MAXIM ADAPTABILIDAD

- suelo de la piscina
- caminadora sumergible
- bicicleta sumergible
- luces
- cámaras
- contra corriente
- masaje bajo el agua
- curso de obstáculos

FACIL MONTAJE

- Sin levantar objetos pesados.**
Piezas llevadas a mano, encajar a través de la puerta norma
- Construcción con tornillos.**
Sin soldaduras en el sitio.

TOTALMENTE MODULAR

- Todos nuestros sistemas están hechos a la medida; Cualquier tamaño forma o profundidad

CERTIFICACIONES

- Certificado en la clase I como dispositivo médico (MDD, por sus siglas en inglés)
- ISO 9001:2015
Fabricante certificado
- ISO 13485:2012
Proveedor autorizado

Ventajas adicionales

- listo para usarse en 2 semanas
- optima higiene en el agua**
- un solo punto de contacto
- mejor que el concreto**
- no fluidos tóxicos
- 1000+** proyectos a nivel mundial
- 80%** materiales reciclables
- 25+** años de duración

PISCINA MODULAR

CONSTRUYE UNA PISCINA PARA EJERCICIOS EN CUALQUIER ESPACIO DISPONIBLE



EWAC Medical
Dulleweg 18
1721 CT Langedijk
The Netherlands



+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

www.ewacmedical.com

PISCINA MODULAR



Creemos que debería ser posible convertir cualquier espacio disponible en su instalación en un centro de terapia acuática totalmente amueblado. Por eso creamos la Piscina Modular de Ejercicios diseñada especialmente para aplicaciones médicas. Nuestros diseños garantizan la mejor higiene del agua en el mercado siendo un factor importante para los pacientes.

Mejor que el concreto

Construir una piscina de concreto es un proyecto complicado con espacio a muchos errores. Lo más importante, su construcción toma mucho tiempo y preparación. La mayoría de las piscinas de concreto toman 4 meses para su construcción y en muchos casos no se está seguro que sea impermeable. Además, los azulejos y las paredes de la piscina son un gran hábitat para las bacterias, el aumento del riesgo de infección.

Pensamos que las piscinas se pueden construir más rápido, más eficientes, más precisas y más higiénicas. Construido con paneles auto soportable de acero inoxidable de 316 L de grado marino, los componentes de la piscina pueden pasar a través de la puerta y se montan en sitio para crear la piscina. El proceso de montaje es extremadamente simple. Con la construcción con tornillos, no necesitamos ninguna soldadura en el sitio. La construcción de la piscina se llevará a cabo en dos semanas, y esto es incluye ¡la planta de tratamiento de agua!

Único punto de contacto

Si eliges la Piscina Modular Médica de Ejercicios de EWAC tendrás un único punto de contacto para todo tu sistema de hidroterapia.

Versatilidad

La Piscina Modular Médica de Ejercicios de EWAC es el producto más versátil en el mercado. Podemos fabricar cualquier tamaño, forma o profundidad. Se puede construir del suelo hacia arriba o en profundidad. Incluso se puede diseñar "mitad hundida" creando un espacio por debajo para que los pacientes pueden ser observados a través de unas ventanas.

Podemos también incluir la Piscina Modular de ejercicios con un nuestro suelo movable. Aumentando las opciones del terapeuta para el tratamiento, cambiando la profundidad de acuerdo a la necesidad del paciente.

Ofrecemos una gran cantidad de opciones en la creación de la mejor piscina para pacientes y terapeutas. En todas las piscinas, la caminadora sumergible Pooltrack se puede instalar facilitando los ejercicios de deambulacion con diferentes velocidades. Podemos integrar cámaras y luces subacuáticas junto con jets, contracorriente y sistema de hidromasaje, aumentando la posibilidad para los terapeutas.

Higiene

Nuestro sistema de la Piscina ha pasado las más estrictas regulaciones de higiene en el agua. Esto ha sido verificado en innumerables ocasiones donde el test de colorante funciona de acuerdo a las norma europeas EN 15288:2008, anexo. Esto significa que



el agua se desinfecta adecuadamente por el sistema de tratamiento y no hay zonas en la piscina donde no haya una buena circulación del agua.

Las bacterias no se adhieren al acero inoxidable, la piscina modular ofrece la mejor higiene del agua en el mercado.



Seguridad

Todos los paneles y las características del piscina modular tienen las esquinas redondas y están diseñadas de acuerdo los estándares europeos EN15288. La Piscina Modular Médica de EWAC ofrece un excelente rendimiento cuando se trata de crear un ambiente de ahorro y ejercicio de bajo impacto para el terapeuta y el paciente.

Fácil Mantenimiento

Como sistema, nuestra piscina modular se mantiene virtualmente sola. Solo necesita ser aspirada regularmente el fondo de la piscina para mantener el nivel de limpieza como cualquier otra piscina. Si las partes externas son limpiadas de vez en cuando, la piscina durará por décadas.

Amigable Con El Medio Ambiente

Los materiales que utilizamos son más del 80% reciclable, reduciendo el impacto ambiental del planeta.

Accesorios

La piscina modular de ejercicios tiene un amplio rango de accesorios útiles que ayudan a la rehabilitación temprana del paciente dando diferentes opciones al terapeuta para crear una terapia divertida.

Cambia La Profundidad De La Piscina

- Con nuestro suelo ajustable para ejercicios acuáticos, la piscina puede cambiar a cualquier profundidad que se adecue a las necesidades del paciente y terapeuta.
- Nuestro suelo ajustable es el suelo ajustable más versátil del mercado y puede equiparse con una caminadora sumergible Pooltrack.

Accesorios Para Ejercicios

- PoolTrack caminadora sumergible
- Bicicleta sumergible
- Curso de obstáculo
- Barreras paralelas removibles
- Pasamanos

Accesorios De Visibilidad

- Cámaras sumergibles con computadora para visualizar y guardar las imágenes
- Luces debajo del agua (sencillas o multicolores)
- Ventanas para observar y poder corregir los movimientos del paciente bajo el agua.

Opciones De Acceso

- Escaleras para salir y entrar de la piscina
- Escaleras autoajustables (en caso de suelo ajustable)

Accesorios De Manipulación Del Paciente

- Silla de ascensor
- Ascensor de piscina
- Elevador montado en techo
- Silla movable
- Camilla / carrito



EWAC Medical está certificado por el registro de calidad Lloyd's de acuerdo a ISO9001:2015 e ISO 13485:2012. EWAC Medica tiene el privilegio de diseñar, fabricar y probar productos médicos Clase I de acuerdo con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos.

EWAC Medical está certificado de acuerdo a:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

por LLOYD'S Registro en Holanda

