

พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้

เปลี่ยนระดับความลึกของน้ำในสระได้ทุกระดับที่ต้องการ ด้วยพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้



EWAC Medical
Dulleweg 18
1721 CT Langedijk
The Netherlands



+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

www.ewacmedical.com

พื้นสระธาธาบำบัดแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้



เราเชื่อมั่นในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยน้ำ นักกายภาพบำบัดจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบำบัดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยได้หรือไม่ นั่น ระดับความลึกของน้ำเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญที่สุด

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงสร้างสระบำบัดพื้นสระว่ายน้ำแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้งานทางการแพทย์ การออกแบบของเราที่น้ำสามารถซึมผ่านเข้าไปได้โดยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้พื้นสระน้ำแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ของเราที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่เปราะบาง/อ่อนแอ

ในธาธาบำบัด คุณควรเลือกระดับความลึกให้เหมาะกับผู้ป่วย ในบรรดาปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้านอายุและความก้าวหน้าของการฟื้นฟูก็มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกระดับความลึกที่เหมาะสมในการทำธาธาบำบัด ด้วยพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ของเรา จึงสามารถเปลี่ยนแปลงระดับความลึกได้โดยการกดปุ่ม พื้นสระจะถูกยกขึ้นอย่างรวดเร็วให้สูงเท่ากับระดับขอบสระ ดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถเดินขึ้นลงจากสระได้โดยง่าย

อเนกประสงค์

พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ของ EWAC MEDICAL เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอเนกประสงค์มากที่สุดในตลาด เราสามารถติดตั้งพื้นสระนี้เข้ากับสระน้ำได้ทุกแบบและทุกขนาด แม้แต่ในสระน้ำที่คุณมีอยู่แล้วก็ตาม ก็สามารถแก้ไขเพื่อติดตั้งพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้นอกจากนี้ พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ยังสามารถติดตั้งเครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำที่มีระบบ POOLTRACK® ได้ด้วยซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายแบบเดินย่ำอยู่กับที่ และเรายังมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับการเดินและการปั่นจักรยานในน้ำที่พร้อมให้บริการแก่คุณ

ในสระน้ำที่สร้างใหม่ คุณสามารถติดตั้งกล่องและไฟส่องสว่างในน้ำได้เช่นเดียวกับการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้า ระบบว่ายน้ำทวนกระแส และระบบวนในน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ความเป็นไปได้ในการรักษาให้แก่นักกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น


ด้วยสระกึ่งสำเร็จรูป ที่มีการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ของเรา เราทำได้แม้แต่การติดตั้งสระน้ำอย่างรวดเร็วโดยปราศจากงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน หมายความว่า คุณจะมีความคุ้มค่าของการใช้งานแห่งนี้สำหรับโซลูชันด้านธาธาบำบัดทั้งหมด

สุขอนามัย

ระบบพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ของเราได้มาตรฐานตรงตามระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมากที่สุดสำหรับน้ำที่ถูกสุขลักษณะ โดยแท้จริงแล้ว ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเดียวในตลาดที่ตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป EN15288:2008 ภาคผนวก เอ การทดสอบด้วยการเติมสี (DYE TEST) ในทางปฏิบัติ หมายถึง การมีพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ไม่มีผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนของน้ำในสระ เช่นเดียวกันกับความจำเป็นที่จะต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ำอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัย

พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ของเรามีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316 L ที่แข็งแรง ด้วยพื้นผิวโพลีเอสเตอร์กันลื่นที่มีความปลอดภัย ทำให้น้ำไหลผ่านพื้นผิวด้านบนทั้งหมดได้ตลอดเวลา จึงกระจายน้ำที่หมุนเวียนไปทั่วทั้งสระได้อย่างทั่วถึง

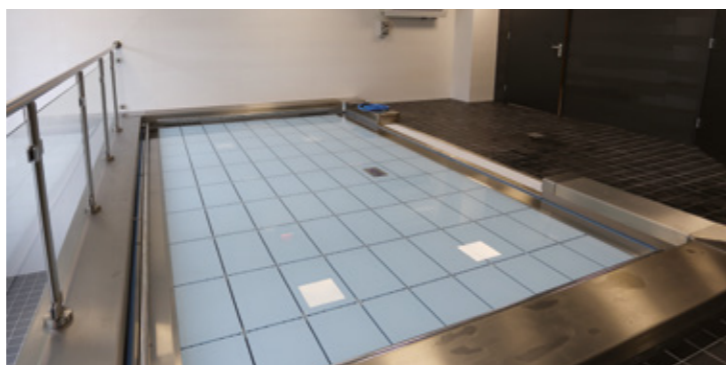

ระบบไฮดรอลิกในน้ำที่มีความปลอดภัย

พื้นสระสามารถเคลื่อนย้ายและจมลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิกในน้ำที่มีความปลอดภัย เมื่อเทียบกับระบบน้ำมันไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกในน้ำนี้จะป้องกันการปนเปื้อนของของเหลวที่เป็นพิษจากระบบไฮดรอลิกลงในสระน้ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

บำรุงรักษาง่าย

สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนทางกลทั้งหมดของระบบได้ง่ายจากพื้นผิวด้านบนของสระ คุณสามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ เพียงแค่ถอดแผงบางส่วนออก ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างทีมค้ำน้ำแบบเทคนิคในการซ่อมบำรุงพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ที่อยู่ด้านล่างซึ่งตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาด

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราใช้วัสดุรีไซเคิลมากกว่าร้อยละ 80 ในขณะเดียวกัน พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ยังช่วยประหยัดพลังงาน หากถูกตั้งค่าไว้ในระดับเดียวกับขอบสระในเวลากลางคืน จะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำและการแผ่รังสีความร้อน ดังนั้น จึงช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อุปกรณ์เสริม

พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นประโยชน์มากมายหลายผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นและยังทำให้นักกายภาพบำบัดมีทางเลือกในการกระตุ้นการฟื้นฟูให้มีความก้าวหน้าและสนุกมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์เสริมสำหรับกายบริหาร

- เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำที่มีระบบ POOLTRACK®
- เครื่องฝึกออกกำลังกายในน้ำโดยใช้จักรยาน
- กายบริหารด้วยเครื่องกีดขวาง
- บาร์คู้ใช้พวงตัวแบบถอดได้
- ราวสำหรับมือจับ



อุปกรณ์เสริมสำหรับการฝึก

- ครีบน้ำ
- ดัมเบลล์น้ำ
- แท่งบำบัดในน้ำ



อุปกรณ์เสริมสำหรับการขึ้นลงสระ

- บันไดปรับระดับเอง (บันไดที่ปรับระดับตามความลึกของพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้)
- ทางลาดเข้าค่อยๆปรับระดับ (เพื่อให้รถวีลแชร์สามารถเข้าและออกได้ง่าย)

อุปกรณ์เสริมสำหรับบริการผู้ป่วย

- เครื่องยกผู้ป่วยที่ติดตั้งรถบนเพดาน
- เก้าอี้แบบเคลื่อนย้ายได้
- เพล / รถเข็น
- ลิฟท์ประจำสระน้ำ

EWAC MEDICAL ได้รับการรับรองคุณภาพจาก LLOYD'S REGISTER QUALITY ในประเภท ISO 9001:2008 และ ISO 13458:2012 EWAC MEDICAL มีสิทธิในการออกแบบ ผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภท 1 ตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์ของสหภาพยุโรป (EUROPEAN MEDICAL DEVICE DIRECTIVE)

มีระบบบำบัดน้ำที่ทำการฆ่าเชื้อได้อย่างเหมาะสมและไม่มี DEAD POCKETS ในสระที่ซึ่งน้ำไม่สามารถหมุนเวียนได้เพียงพอ ด้วยแบคทีเรียไม่สามารถเกาะติดเหล็กกล้าไร้สนิมได้ดี ทำให้สระน้ำกึ่งสำเร็จรูปนี้มีสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด



EWAC MEDICAL ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆดังนี้

ISO 9001:2008
ISO 13458:2012

โดยบริษัทอลด์ส รีจิสเตอร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

