

**MAXIMUM ADAPTABILITY**

- Movable pool floor
- Underwater treadmill
- Underwater bicycle
- Lights
- Camera's
- Counter current
- Underwater massage
- Obstacle course

**EASY ASSEMBLY**

- No heavy lifting.** Parts carried in by hand, fit through normal door.
- Bolted construction.** No welding on site.

**FULLY MODULAR**

- All our systems are made to order: any size shape or depth

**QUALIFICATIONS**


- Certified as Class I Medical Device (MDD)
- ISO 9001:2015 Certified manufacturer
- ISO 13485:2012 Qualified supplier

**Additional advantages**

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ready for use in 2 weeks        | Optimal water hygiene           |
| Single point of contact         | Better than concrete            |
| No toxic fluids                 | <b>1000+</b> projects worldwide |
| <b>80%</b> recyclable materials | <b>25+</b> years lifespan       |

组合泳池

在任何可用的地方建造一个水上锻炼池

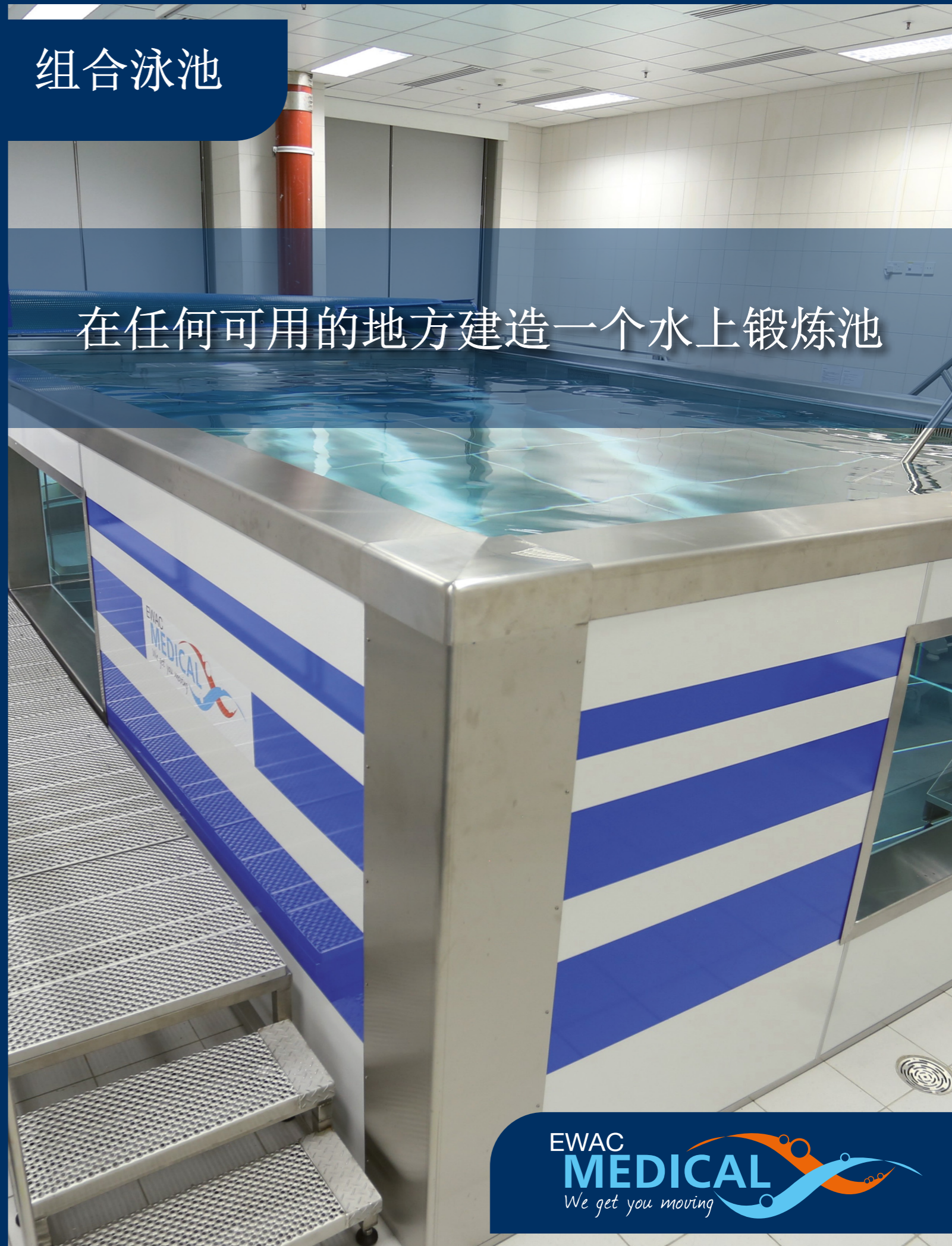

EWAC Medical  
Galileistraat 20  
1704 SE Heerhugowaard  
The Netherlands



+31 226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice

www.ewacmedical.com

# 组合锻炼池



我们认为将任何可以利用的空间打造成一个设备齐全的水疗中心变成可能。所以，这也就是为什么我们设计了一个专门针对医疗应用的组合锻炼池。我们的设计保证了从市场上获取的水的卫生度。这对于那些脆弱的患者是非常重要的。

## 比混凝土还要好

用混凝土建造一个水池是一个极其繁琐的过程，主要是因为会有很大的误差。最重要的是，建造这样一个游泳池需要花费大量的时间并需要做很多准备工作。大多数混凝土池至少需要4个月才能建成。并且，在许多情况下，游泳池的密闭性不能完全保证。此外，池壁上的瓷砖和水泥浆会成为细菌的栖息地，这会增加感染风险。

我们认为可以更快、更高效、更精确、更卫生地去建造游泳池。由船用级别的316L不锈钢板建造，泳池组件可以通过一扇开着的门运入现场，并可以在现场组装成一个游泳池。装配的过程也极其简单。仅需螺栓即可，我们不需要任何焊接，打磨，或其他在现场进行的金属加工。建造这样一个游泳池只需两周，建造水处理系统的时间也同时包括在内。

## 简单的解决方式

如果你选择了一个EWAC医疗器械公司的组合锻炼游泳池，那么对于您整个的水疗方案，您都会有一个简单的解决方式。

## 功能多样

EMAC医疗器械公司的组合游泳池是目前市场上功能最多样的产品。我们可以把它做成任何尺寸、形状或深度的产品。它可以被建造成一个凹陷的水池，或者高于地面。我们甚至可以做成“半凹”状，建成一个低于地面的一个泳池，这样治疗师可以通过大的水下窗户去观察病人。



我们也可以将组合锻炼游泳池与我们的可移动泳池地板配合使用。这可以大大增加治疗师的治疗选择，因为这样他就可以根据病人的需要去改变深度。

为了让治疗师和病人拥有一个更好的泳池，我们为他们提供大量的选择。在每一个游泳池里，您都可以安装一个pooltrack水下跑步机，便于让病人以变化的速度去进行行走锻炼。我们可以将射流、逆流、窗户、层流装置、气泡板、水下灯和摄像机等都安装在泳池壁上，这将大大增强泳池在水疗过程中的可用性。



## 卫生

我们的组合泳池系统符合最严格的关于水卫生的条例。根据欧洲标准EN 15288:2008附件A在几个地方进行的染料实验也已证实了

上述结论。实际上，这意味着水经过水处理系统后是经过适当消毒的；并且在没有充分水循环的情况下也是没有卫生死角的。



## 安全

组合泳池的所有组装板和组成部分的边缘都是圆弧形，并且我们是按照EN 15288欧洲标准对其进行设计。当谈到为治疗师和病人创建一个节约并且低冲击的运动环境时，一个EWAC医疗游泳池就可以为他们提供最佳的治疗环境。



## 维护简单

作为一个系统来说，我们的组合锻炼泳池实际上是免维护的。您只需定期真空清洗泳池底部去保持像其他泳池一样的清洁度；此外，如果偶尔擦拭泳池的外部表面，那么这个泳池就可以使用几十年的时间。



## 环境友好型

我们使用的材料中超过80%的都是可循环利用的材料，这样就大大减少了对环境的影响。



## 配件

一个组合锻炼游泳池有一系列有用的配件，这些配件可以使病人更快地康复，并且给治疗师提供了多样选择，从而可以加快病人康复的进程并且增加康复过程中的趣味性。



## 将泳池改成任意深度

•配合我们的可调节泳池地板，就可将泳池可以改变为任何深度，以便去更好地满足治疗师和病人的需求。  
•我们的可移动泳池地板的是目前市场上最功能多样的地板；与此同时，您还可以配备一个pooltrack®水下跑步机



## 锻炼配件

- Pooltrack®水下跑步机
- 水中自行车
- 障碍
- 可拆卸双杠
- 扶手



## 可视化配件

- 水下摄像机，可以用计算机来播放和记录运动图像
- 水底灯（单色或多色）
- 观察窗，可以用来观察和纠正病人的水下运动状况



## 进入泳池方式

泳池内或是泳池外的楼梯  
(安装在可移动地板上的) 自适应楼梯



## 病人触摸配件

- 座椅升降器
- 泳池升降机
- 隔板升降机
- 移动椅子
- 延伸器/拉伸器



根据ISO 9001:2015和ISO 13485:2012，EWAC医疗器械公司通过劳氏质量认证。EMAC医疗器械公司有权根据《欧洲医疗器械方针》设计、生产以及测试I类医疗产品。

EWAC Medical is certified according to:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

by Lloyd's Register Nederland

