



# SUELO AJUSTABLE

## CAMBIA LA PROFUNDIDAD DE LA PISCINA CON UN SUELO AJUSTABLE

### SUPERFICIE PERMEABLE AL AGUA

El agua de la piscina se mueve de forma uniforme a través de la superficie, debido a los espacios entre los azulejos. Por eso:

- ♥ Óptimo para la higiene del agua
- Circulación uniforme del agua
- 🕒 El suelo se mueve más rápido a través del agua

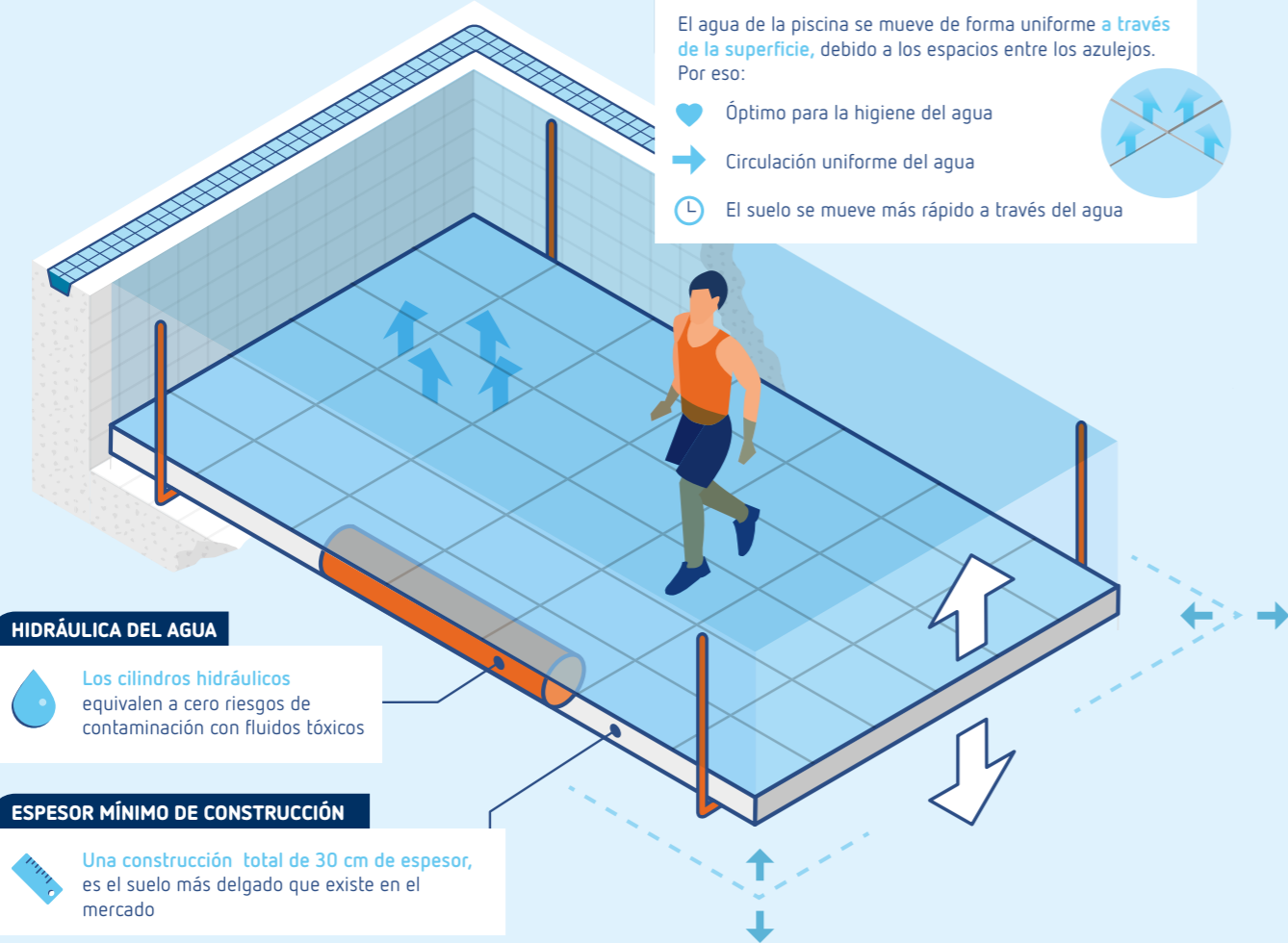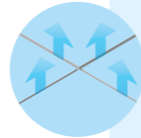

### HIDRÁULICA DEL AGUA

Los cilindros hidráulicos equivalen a cero riesgos de contaminación con fluidos tóxicos

### ESPESOR MÍNIMO DE CONSTRUCCIÓN

Una construcción total de 30 cm de espesor, es el suelo más delgado que existe en el mercado

### MAXIMA ADAPTABILID

- 🚶 Caminadora subacuática
- 🚲 Bicicleta subacuática
- 🏊 Curso de obstáculo
- 👁️ Cámaras
- 🌊 Contra corriente
- 🌞 Masaje subacuático
- 🏗️ Suelo ajustable

### SEGURIDAD

- Fuerte arco de acero inoxidable
- Superficie de seguridad anti deslizante
- Permeabilidad del agua en toda la superficie
- Seguridad hidráulica

### TEST DE COLORANTES

Solamente los suelos ajustables EN15288-2:2008 índice pasó la prueba de colorante

### CERTIFICACIONES

- Certificado en la clase I como dispositivo médico (MDD, por sus siglas en inglés)
- Fabricante certificado ISO 9001:2015
- Proveedor autorizado ISO 13485:2012

### POSIBILIDAD DE RE MONTAJE

Puede instalarse en nuevas o en piscinas ya existentes

### Ventajas adicionales

- 📅 Listo para usarse en una semana
- 💧 Higiene optima de agua
- 🕒 25+ años de duración
- 🗨️ Único punto de contacto
- 🔧 Fácil mantenimiento
- ♻️ 80% materiales son reciclables
- ☠️ sin fluidos tóxico
- 🌍 1000+ proyectos a nivel mundial

EWAC Medical  
Galileistraat 20  
1704 SE Heerhugowaard  
The Netherlands

EWAC  
**MEDICAL**  
We get you moving

Subject to change without notice

+31 226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.com

www.ewacmedical.com

EWAC  
**MEDICAL**  
We get you moving

# SUELO DE EJERCICIO ACUÁTICO AJUSTABLE



Creemos que en la rehabilitación acuática, el terapeuta debe de crea para el paciente un óptimo medio ambiente para realizar ejercicios, la profundidad del agua es una de las variantes más importantes.

Es por eso que hemos creado una piscina con un suelo especial desarrollado para las aplicaciones médicas. Nuestro revolucionario diseño de permeabilidad de agua, nuestro suelo ajustable ofrece el mejor desempeño en higiene de todo el mercado. Siendo esencial para los pacientes más sensibles.

En la terapia acuática, deberías ser capaz de escoger una profundidad que se adecue al paciente. Edad, altura y el progreso más otros factores, juegan un papel importante para determinar el mejor ejercicio en la profundidad correcta. Con nuestro suelo ajustable, la profundidad se puede modificar con solo oprimir un botón. El suelo se puede elevar a nivel cero de formar inmediata, así los pacientes pueden meterse y salirse de la piscina de forma sencilla.



## Versatilidad

El suelo ajustable de EWAC Medical es el producto más versátil en el mercado. Podemos ajustarnos a cualquier piscina sin importar el tamaño. El suelo ajustable se puede instalar en las piscinas ya existentes. Se pueden equipar con un Pooltrack caminadora subacuática, facilitando los ejercicios de deambulación. Ofrecemos una amplia variedad de accesorios para la deambulación y bicicleta.

En las nuevas piscinas, se puede equipar con cámaras y luces subacuáticas junto con jets, contracorriente y sistema de hidromasaje, aumentando la posibilidad para los terapeutas.

Con la versatilidad de nuestra piscina modular, podremos instalarla de forma más rápida y sin grandes construcciones. Eso significa que tendrás un solo punto de contacto para solución de cualquier problema.



## Higiene

Nuestro sistema del suelo ajustable ha pasado las más estrictas regulaciones de higiene en el agua. De hecho es el único sistema en el mercado que ha pasado los requerimientos europeos EN 15288:2008, anexo A test colorante. Esto significa que la presencia de un suelo ajustable no afecta en la circulación del agua en la piscina para una propia desinsectación.




## Seguridad

El marco de nuestro suelo ajustable está hecho un resistente acero inoxidable AISI 316, con un poliéster de seguridad en la superficie anti deslizante. El agua puede moverse a través de toda la superficie de la piscina todas las veces que el suelo se mueve.



## Sistema de agua hidráulico seguro

El movimiento del suelo se realizar con un seguro sistema hidráulico de agua. Comparado con el sistema hidráulico de aceite, ofrece una mejor protección de las contaminaciones con los fluidos hidráulicos tóxicos dentro del agua de la piscina.

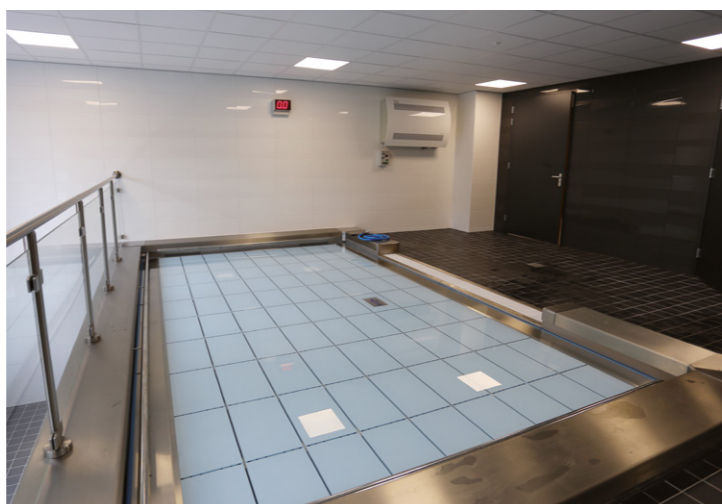

## Fácil mantenimiento

Todas las partes mecánicas son de fácil acceso desde la superficie del suelo. El servicio y el mantenimiento se pueden realizar con solo retirando unos cuantos paneles. Al contrario con otros productos del mercado que necesitan un técnico que se sumerja para el mantenimiento del suelo.



## Amigable con el medio ambiente

Utilizamos más del 80% de materiales reciclados. Al mismo tiempo, el suelo ajustable ayuda a mantener la energía: si se pone a nivel cero por la noche previene que el agua se evapore con la radiación de la calefacción. Por eso previene que se pierda la temperatura y reduce las emisiones de CO2



## Accesorios

El suelo ajustable tiene un amplio rango de accesorios útiles que ayudan a la rehabilitación temprana del paciente dando diferentes opciones al terapeuta.



## Accesorios para ejercicios

- PoolTrack caminadora sumergible
- bicicleta sumergible
- curso de obstáculo
- barraras paralelas removibles
- pasamanos




## Accesorios para entrenamiento

- aletas acuáticas
- pesas acuáticas
- noodles



## Opciones de acceso

- Escaleras autoajustables (los escalones se ajustan a la profundidad del suelo ajustable)
- Una rampa para una entrada gradual (para una sencilla entrada y salida de silla de ruedas)

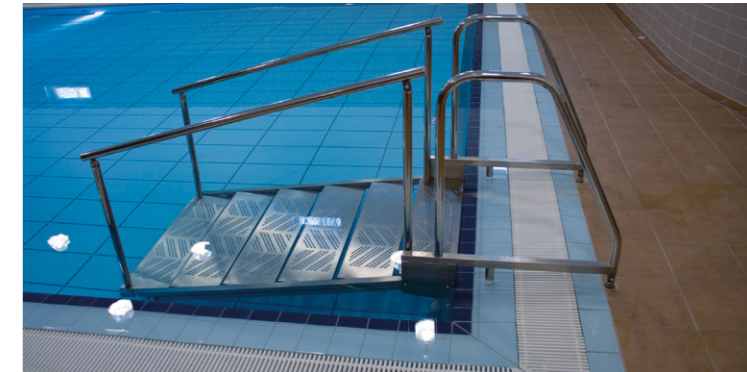

## Accesorios de manipulación del paciente

- elevador en el techo
- silla móvil
- camilla / carrito
- elevador de piscina



EWAC Medical está certificado por el registro de calidad Lloyd's de acuerdo a ISO9001:2015 e ISO 13485:2012. EWAC Medica tiene el privilegio de diseñar, fabricar y probar productos médicos Clase I de acuerdo con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos.

EWAC Medical está certificado de acuerdo a:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

por LLOYD'S Registro en Holanda

