




水処理

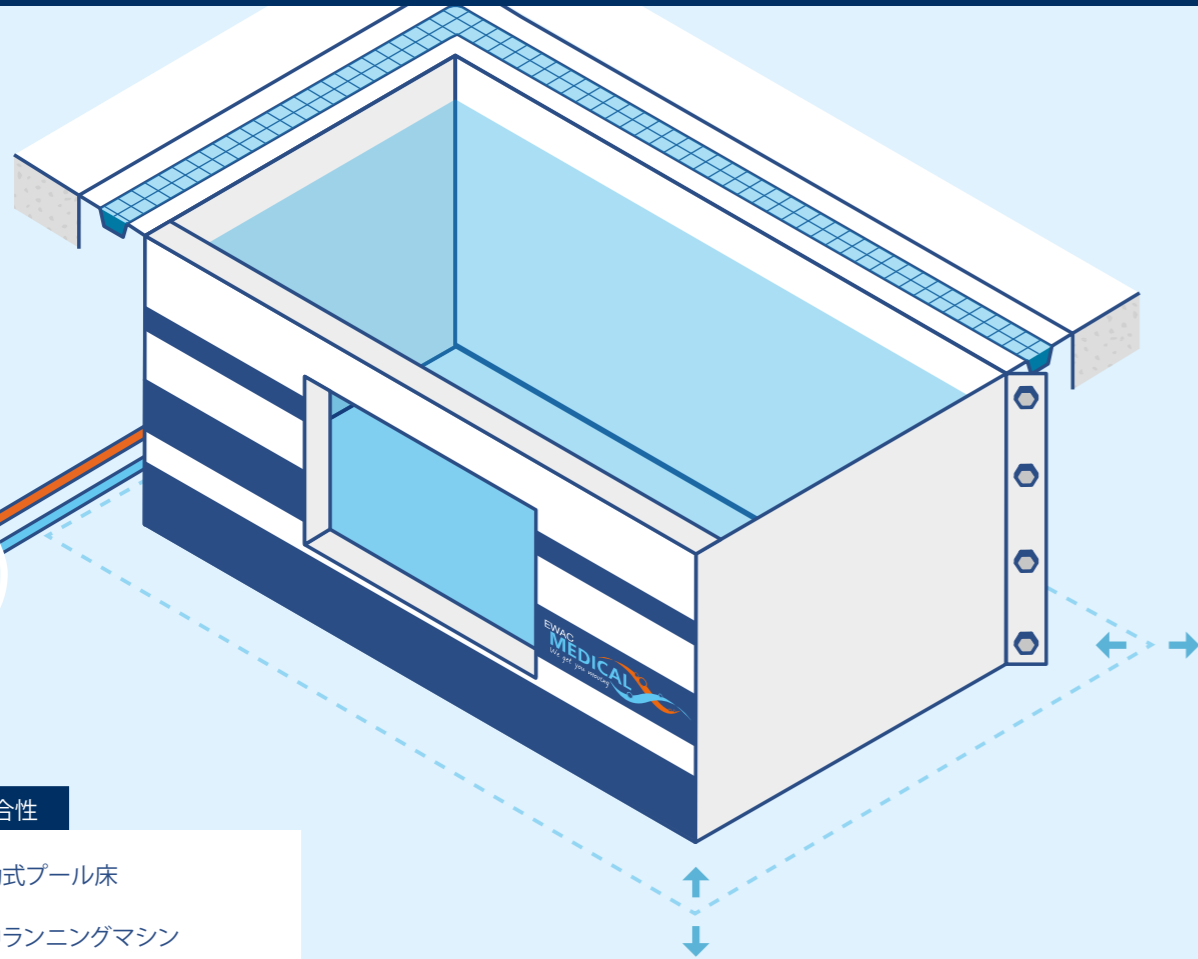

### 最大限の適合性

- 可動式プール床
- 水中ランニングマシン
- 水中バイク
- 照明
- カメラ
- 逆流
- 水中マッサージ
- 障害物コース

### ③組み立てが簡単

- 重量物の持ち上げ不要。部品は通常の戸口から手持ちで搬入可能。
- ボルト締め構造。現場での溶接不要。

### 完全モジュール式

- 弊社のシステムはすべてオーダーメイド。どんな大きさ、形状、深さにも対応。

### 認証

- 医療機器指令 (MDD) クラスIの認証を取得
- ISO9001:2015の認証を取得した製造者
- ISO13485:2012の認証を取得したサプライヤー

## さらなる特長

- 2週間で使用可能
- 最適な衛生状態の水
- 単一窓口
- コンクリートより好適
- 有毒な液体は不使用
- 1000+ 世界中で件を超す導入実績
- 80% 材料の再利用可能
- 25+ 年を超す寿命

# モジュール式プール

## あらゆる空きスペースに水中運動用プールを建設します



EWAC Medical  
Galileistraat 20  
1704 SE Heerhugowaard  
The Netherlands



+31 226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice



www.ewacmedical.com

# モジュール式運動用プール



施設内のどのような空きスペースであっても、用具を完備した水中療法センターに変えられると私たちは信じています。だからこそ、弊社は医療用に特別に設計したモジュール式運動用プールを開発しました。市場で入手できるものの中で最高の水質衛生を保証する設計になっています。体が弱い患者にとって、これは非常に重要です。

## コンクリートより好適

コンクリート製プールは、建設の際に間違いが生じる可能性が数多くあり、非常に面倒です。最も重要な点は、建設に膨大な時間と準備を要することです。ほとんどのコンクリート製プールは、建設に最短でも4カ月はかかります。また、多くの場合、水漏れしないという確証がありません。しかも、プール壁のタイルと目地材にバクテリアが大量に繁殖し、感染リスクを高めます。

弊社では、プールはもっと迅速に、もっと効率よく、もっと正確に、そして、もっと衛生的に建設できると考えています。船舶仕様である(AISI規格)316Lステンレス鋼製自立パネルで作られているので、部品を戸口から搬入し、現場で組み立ててプールを作ることができます。組み立て手順は極めてシンプルです。ボルト締め構造ですから、現場での溶接や研削、その他の鍛冶作業が一切不要です。プールの建設に要する期間はわずか2週間で、しかも、これには水処理プラントも含まれます！

## 1つの窓口で対応

EWACメディカルのモジュール式運動用プールを選べば、1つの窓口で水治療法のソリューション全体に対応します。

## 多用途

EWACメディカルのモジュール式運動用プールは、市場で最も多用途の製品です。あらゆる大きさ、形状、深さに仕上げることができます。埋め込み式でも、地面より高い位置にでもプールを建設できます。さらには「半埋め込み式」にして、大きな水中窓を通して患者を観察できるデッキ下エリアを設ける設計にすることも可能です。

また、モジュール式運動用プールには、弊社の可動式プール床を取り付けることができます。そうすれば、療法士が患者のニーズに応じて水深を変えることができるようになるので、治療法の実験が大幅に拡大します。

弊社は、患者や療法士にとってプールをより良いものにするため、膨大な数のオプションを用意しています。すべてのプールに水中ランニングマシン「プールのトラック(POOLTRACK)」を設置することができますので、歩行訓練をさまざまな速度で円滑に行えるようになります。また、プール壁にジェット水流、逆流、窓、層流装置、発泡装置、水中照明、カメラを組み込むことができますので、水中療法向けに大幅に使いやすくなります。

## 衛生的

弊社のモジュール式運動用プールシステムは、最も厳格な水質基準を満たしています。これは、欧州規格であるEN 15288:2008の付録Aに従った色素試験によって実証されています。つまり、水処理システム



ムによって水が適切に消毒され、水の循環が不十分なデッドポケットがプール内に存在しないということです。ステンレススチールにはバクテリアが付着しにくいことから、モジュール式プールは考えうる限り市場で最高の衛生性能を備えています。



## 安全性

モジュール式プールのパネルや形状はすべて縁が丸く、欧州規格EN 15288に沿って設計されています。EWACメディカルのモジュール式プールは、療法士と患者の双方にとって安全で負荷が少ない運動環境を創出することに関して、最先端の性能を備えています。

## メンテナンスが簡単

システムとして、弊社のモジュール式運動用プールはほとんどメンテナンスが不要です。プールの底に定期的に掃除機をかけるだけで、他のすべてのプールとまったく同程度の清潔度を維持することができます。時々、外面の拭き掃除を行えば、プールは何十年間も長持ちします。

## 環境に優しい

弊社が使用する材料の80%以上がリサイクル可能で、地球への環境影響を大幅に減らします。

## アクセサリ

モジュール式運動用プールには、患者のリハビリテーションを加速し、療法士がリハビリテーションの進捗と楽しみを高めることができる、便利なアクセサリを幅広く用意しています。

## プールをあらゆる深さに変更

- 弊社の調節可能な水中運動用の床を使えば、療法士と患者に合わせてプールをあらゆる深さに変更することができます。
- 弊社の可動式プール床は市場で最も多用途のプール床であり、水中ランニングマシン「プールのトラック(POOLTRACK®)」を取り付けることができます。



## 運動用アクセサリ

- 水中ランニングマシン「プールのトラック(POOLTRACK®)」
- 水中バイク
- 障害物コース
- 着脱式平行棒
- 手すり



## 視認用アクセサリ

- 水中カメラと動画表示・録画用コンピューター
- 水中照明(単色または多色)
- 水中での患者の動きを追いかけ、補正するための観察用窓nts



## プールへの出入り方法

- プールの内側と外側の階段
- 自動調節式階段(可動床の場合)



## 患者支援用アクセサリ

- 座席昇降機
- プール昇降機
- 天井取り付け式つり上げ装置
- 可搬式座席
- ストレッチャー／手押し台車



EWACメディカルは、ロイドレジスタークオリティアシユアランスによりISO 9001 とISO 13485 の認証を受けています。EWACメディカルは、欧州医療機器指令に従い、クラスIの医療用製品を設計・製造・検査する権利を有しています。

EWACメディカルは、ロイドレジスターネザランド

(LLOYD'S REGISTER NEDERLAND)

により以下の認証を受けています:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

