



EWAC
MEDICAL
We get you moving

FÜHREND IN HYDROTHERAPIE EQUIPMENT


www.ewacmedical.com

UNSER KERNGESCHÄFT

EWAC Medical ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Hydrotherapieprodukten. Die Bedeutung von Wasser für die Rehabilitation ist bekannt. Die Rehabilitation im Wasser führt zu einer Zeitersparnis von 40% im Vergleich zu klassischen Methoden. Die Grundlage für eine professionelle Behandlung ist jedoch eine angemessene Arbeitsausstattung. EWAC Medical liefert Übungsbecken, die für jede Art der Wassertherapie geeignet sind. Unsere verstellbaren Fußböden wurden kürzlich für den Einsatz in der Rehabilitation und Therapie entwickelt. Die Böden sind höhenverstellbar, so dass die Wassertiefe variiert werden kann. Auf diese Weise können die idealen therapeutischen Umstände geschaffen werden, um einen optimalen Beitrag zur Therapie zu leisten.

Produkt

Das innovativste und umfassendste Sortiment an aquatischen Therapiegeräten der Welt.

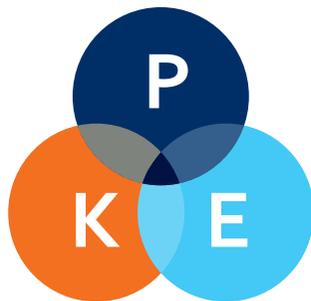

WISSEN

EWAC Medical spielt eine aktive Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung von Wissen über die Wassertherapie.

ERFAHRUNG

Über 1.000 erfolgreich abgeschlossene aquatische Therapieprojekte weltweit.

Wir glauben, dass ein Pool schneller, effizienter, genauer und hygienischer sein kann. Die Poolkomponenten bestehen aus selbsttragenden

Edelstahlplatten in Marinequalität 316L und können durch eine normale Türöffnung transportiert und vor Ort zusammengebaut werden, um den Pool zu erstellen. Der Montagevorgang ist denkbar einfach. Aufgrund unserer Schraubkonstruktion müssen vor Ort keine Schweiß-, Schleif- oder sonstige Arbeiten mit hohen Temperaturen durchgeführt werden. Der Bau des Pools dauert nur ca. eine Woche und beinhaltet die Wasser- aufbereitungsanlage!

MODULAR POOL



BEWEGLICHER BODEN

Ein Therapeut sollte die optimale Trainingsumgebung für den Patienten bieten können.

EWAC Medical hat einen Schwimmbeckenboden entwickelt, der speziell für medizinische Anwendungen optimiert wurde. Unser Design hat eine beispiellose Wasserdurchlässigkeit. Unser beweglicher Poolboden bietet die beste hygienische Leistung auf dem Markt.

Bei der Wassertherapie sollten Sie die Wassertiefe so wählen, dass sie dem Patienten entspricht. Alter, Größe und Therapiefortschritt spielen unter anderem eine wichtige Rolle für die richtige Übungstiefe.



Mit unserem beweglichen Poolboden kann die Tiefe per Knopfdruck eingestellt werden. Der Boden kann schnell auf Bodenniveau angehoben werden, so dass Patienten problemlos in den Pool und aus dem Pool gebracht werden können.



UNTERWASSER FAHRRAD

Das EWAC Medical Unterwasserfahrrad wurde speziell für Rehabilitationsübungen im Wasser entwickelt. Die verdeckte Turbine erzeugt einen Widerstand, der sich mit der Trittschwindigkeit des Patienten zunehmend erhöht. Der Sattel ist höhenverstellbar.



HINDERNISSTRECKE

Der Hindernisparcours verwandelt den Pool in eine Unterwasser-Sporthalle. Koordination und Gleichgewichtstraining können in einem sehr frühen Stadium der Rehabilitation durchgeführt werden.

Aufgrund des Auftriebs und der Widerstandsfähigkeit von Wasser bietet dies eine sichere Art zu trainieren, ohne Sturzgefahr.



Das EWAC Medical Unterwasserlaufband wurde speziell für Rehabilitationsübungen im Wasser entwickelt. Es kombiniert die Vorteile der Gewichtsbelastung mit der Schmerzreduzierung beim Wasser-, Gleichgewichts- und Gangtraining, wodurch die mechanischen Auswirkungen viel geringer sind. Das Laufband ist als Stand-Alone-Einheit und als integrierter Typ im verstellbaren Boden erhältlich.



UNTERWASSER LAUFBAND



POOLTRACK® CURVE

Unser einzigartiges Freilauf-Rollensystem sorgt für ein Minimum an Widerstand bei der Bewegung der Beine, die Laufgeschwindigkeit wird von der Person bestimmt, die auf dem Laufband trainiert. Das Laufband kann an einer beliebigen Stelle im Pool platziert und bei Bedarf für Zirkeltraining oder Gruppensitzungen problemlos in und aus dem Pool transportiert werden.



WASSERAUFBEREITUNG

EWAC Medical kümmert sich neben modernsten aquatischen Therapiegeräten auch um die gesamte Wasseraufbereitungsanlage, um optimale Hygiene und Sicherheit für den Patienten zu gewährleisten.

EWAC Medical nutzt moderne und erprobte Technologien, um das richtige System entsprechend der Größe und Nutzung des Pools zu entwickeln. Gerade in medizinischen Behandlungssituationen steht die hygienische Sicherheit an erster Stelle. Mit unseren Wasseraufbereitungssystemen kann die Chlorkonzentration auf einem Wert gehalten werden, der sowohl sicher als auch niedrig ist. Somit wird der pH-Wert des Wassers für den Benutzer auf einem sicheren und angenehmen Niveau gehalten.



Die Verbrennungsbehandlungsbäder von EWAC Medical wurden entwickelt, um die spezifischen Anforderungen im Bereich der Behandlung von Verbrennungen und chronischen Hautproblemen zu erfüllen. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Behandlung von Verbrennungen entwickelt.

Verbrennungsbehandlungsbäder sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: höhenverstellbar oder stationär.

BRANDWUNDEN-BEHANDLUNGSBÄDER


Die höhenverstellbare Version kann mit einer Badewanne in Standardlänge oder einer verlängerten Version ausgestattet werden, damit größere Patienten für die Behandlung der Ohren und der Gesichtsbereiche vollständig eingetaucht werden können.



SCHMETTERLINGSBAD

Das EWAC Medical Schmetterlingsbad ist sehr praktisch und ergonomisch gestaltet.

Die Form und Größe des Bades garantieren dem Patienten optimale Bewegungsfreiheit. Zumal bietet es dem Therapeuten einen optimalen Zugang, um den Patienten bei den Übungen im Bad zu unterstützen. Das Bad kann mit einer leistungsstarken Unterwassermassageeinheit und einem Filtersystem einschließlich Heizung und Desinfektion ausgestattet werden.

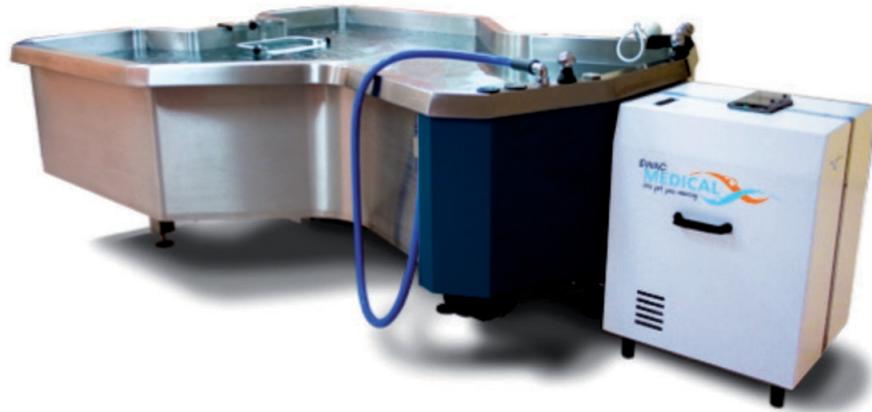

EWAC Medical stellt verschiedene Arten von Bädern her, von Behandlungsbädern bis zu Whirlpools. Die Wannen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, so dass alle Wünsche erfüllt werden können.

Darüber hinaus bietet EWAC Medical ein umfangreiches Zubehörprogramm für die verschiedenen Arten von Bädern. Die Bedienung ist optimal gestaltet und es wird stets auf ein Höchstmaß an Komfort und Ergonomie geachtet.

VERSCHIEDENE BÄDER



WELLNESS-PRODUKTE

Für die Ausstattung von Spa-, Beauty- oder Wellnesscentern bietet EWAC Medical ein komplettes Sortiment an Massagebädern und anderen Entspannungsgeräten an.

Die angebotenen Produkte gehören zu den Besten ihres Sortiments und vermitteln dem Kunden ein Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung in einer luxuriösen Umgebung. Viele dieser Produkte können auch stark zu Therapien beitragen und sind daher auch für Krankenhäuser und Reha-Zentren optimal geeignet.



HYDROTHERAPIE-TRAININGSKURSE

EWAC Medical organisiert das ganze Jahr über Hydrotherapieschulungen in Form von Workshops, Firmenschulungen und mehrtägigen Schulungen. Die Unterweisungen können eine Einführung in die Wassertherapie allgemein sein, aber auch eine Einführung in ein spezifisches Thema, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder als Auffrischung für den Therapeuten, Coach, Betreuer oder die Krankenschwester.

Die Hydrotherapieworkshops können verschiedene Themen behandeln, wie zum Beispiel:

- Stabilität und Koordination
- Gang- und Gehübungen
- Entspannung und relaxen
- Patientenhandhabung
- Unterwasser Fitness
- Sturzpräventionstraining
- Ältere Menschen und Demenz
- Intensivpatienten



Jedes Krankenhaus, Pflege-, Altenheim oder Rehabilitationszentrum ist anders, auch für Menschen die eine Wassertherapie benötigen.

EWAC Medical kann maßgeschneiderte Wassertherapie-Schulungen organisieren, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Um sicherzustellen, dass die Patienten den Pool so gut wie möglich nutzen können, ist eine ordnungsgemäße Wartung erforderlich. EWAC Medical bietet Service-schulungen an, um die Qualität des Service hinsichtlich Effizienz und Effektivität zu verbessern. Wir bieten technische Schulungen für von EWAC Medical gelieferte Hydrotherapiegeräte an. Ebenso bieten wir auch Wasserhygienetraining an. Alle Schulungen stehen Kunden und Händlern zur Verfügung.



FIRMEN-INTERNE TRAININGS



POOLWARTUNG & HYGIENETRaining

WARUM EIN MEDIZINISCHER MODULPOOL VON EWAC SIE IN BEWEGUNG BRINGT

POOLTRACK®


Unterwasser-Laufband



POOLTRACK® UNTERWASSER-LAUFBAND

- Durchführen von stationären Gehübungen Übungen
- Untersuchung der Gangart und des Gehverhaltens mit Kameras
- Für Rehabilitation, körperliches Training oder Gewichtsabnahme
- Sicheres AC-Antriebssystem
- Geschwindigkeiten von 0,2 bis 11km/h
- Steuerung über Touchscreen-Oberfläche oder Fernbedienung
- denselben Raum für Zwecke nutzen, wenn nicht gebraucht wird


BEWEGLICHER BODEN

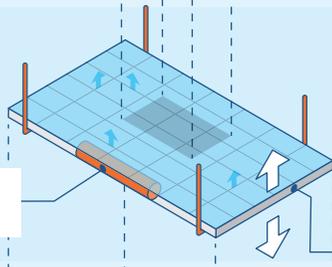

WASSERDURCHLÄSSIGE OBERFLÄCHE

Durch die **Öffnungen zwischen den Fliesen** kann das Wasser ungestört durch die Oberfläche fließen:

- Optimale Wasserhygiene!!
- Ungestörte Wasserzirkulation.
- Der Boden bewegt sich schneller durch das Wasser.

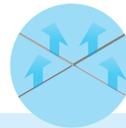


WASSERHYDRAULIK

Wasserhydraulikzylinder bedeutet kein Risiko der Kontamination mit giftigen Flüssigkeiten

MODULAR-POOL



Water treatment

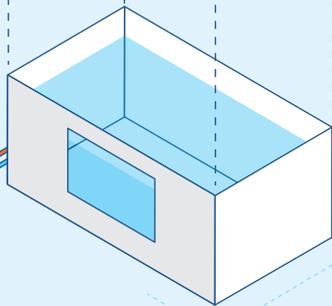

MINDESTKONSTRUKTIONSDICKE

Gesamtstärke der Konstruktion von 30 cm. Dies ist der dünnste bewegliche Boden auf dem Markt.

EINFACHE MONTAGE

- Kein schweres Heben. Die Teile werden von Hand hingetragen und passen durch eine normale Tür.
- Geschraubte Konstruktion. Keine Schweißarbeiten vor Ort.

VOLLSTÄNDIG MODULAR

Alle unsere Systeme werden auf Bestellung gefertigt: jede Größe, Form oder Tiefe

TOTALE WASSERTHERAPIE-LÖSUNG

KAMERA'S

Fest installierte Unterwasserkameras und -leuchten



Zusätzliche Vorteile

- In einer Woche einsatzbereit
- Zentrale Anlaufstelle
- Besser als Beton
- 80% recycelbar Materialien
- 1000+ Projekte weltweit
- Optimale Wasserhygiene
- Einfache Wartung
- No toxic fluids
- 25+⁸ Jahre Lebenserwartung



KONTAKTINFORMATIONEN

EWAC Medical Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
Niederlande



EWAC Medical ist zertifiziert nach:

ISO 9001

ISO 13485

Durch Lloyd's Register Niederlande

+31 226 313 457

medical@ewac.nl

www.ewacmedical.com