

Water treatment

MAXIMUM ADAPTABILITY

- Movable pool floor
- Underwater treadmill
- Underwater bicycle
- Lights
- Camera's
- Counter current
- Underwater massage
- Obstacle course

EASY ASSEMBLY

- No heavy lifting.** Parts carried in by hand, fit through normal door.
- Bolted construction.** No welding on site.

FULLY MODULAR

- All our systems are made to order: any size shape or depth

QUALIFICATIONS

- Certified as Class I Medical Device
- ISO 9001 Certified manufacturer
- ISO 13485 Qualified supplier

Additional advantages

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ready for use in 2 weeks | Optimal water hygiene |
| Single point of contact | Better than concrete |
| No toxic fluids | 1000+ projects worldwide |
| 80% recyclable materials | 25+ years lifespan |

MODULARES BAD

Bauen sie Hydrotherapie-Pool an jedem beliebigen Ort



EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands



+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus dieser Broschüre können Sie keine Rechte ableiten.

www.ewacmedical.com

MODULARER HYDROTHERAPIE POOL



Wir glauben, dass es möglich sein sollte, jeden verfügbaren Raum in Ihrer Einrichtung in ein voll ausgestattetes Wassertherapiezentrum umzuwandeln. Aus diesem Grund haben wir einen modularen Übungspool geschaffen, der speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Unser Design garantiert die beste Wasserhygiene auf dem Markt. Dies ist besonders bei schutzbedürftigen Patienten wichtig.

Besser als Beton

Das Bauen eines Pools aus Beton ist ein mühsamer Prozess mit viel Spielraum für Fehler. Vor allem braucht der Bau eines solchen Pools viel Zeit und Vorbereitung. Die meisten Betonbecken benötigen für den Bau 4 Monate und länger. In einigen Fällen können Sie nicht sicher sein, ob der Pool wasserdicht ist. Fliesen und Fugenmörtel an den Wänden des Pools sind außerdem ein hervorragender Lebensraum für Bakterien und erhöhen das Infektionsrisiko.

Wir glauben, dass ein Pool schneller, effizienter, genauer und hygienischer gebaut werden kann. Die Poolkomponenten bestehen aus selbsttragenden Edelstahlplatten der Marine-Klasse 316L und können durch eine normale Türöffnung transportiert und vor Ort zusammengebaut werden um den Pool nach Wunsch zu gestalten. Der Montagevorgang ist denkbar einfach. Aufgrund unserer Schraub-Konstruktion sind vor Ort keine Schweiß-, Schleif- oder sonstige Arbeiten mit Wärmeeintrag notwendig.

Der Einbau des Pools dauert nur zwei Wochen - einschließlich der Wasseraufbereitungsanlage.

Alles an einem Ort

Wenn Sie sich für einen modularen Therapie Pool von EWAC Medical entscheiden, haben Sie alle Anwendungen für die gesamte Hydrotherapie in einem.

Vielseitig

Der EWAC Medical Modular Therapie Pool ist das vielseitigste Produkt auf dem Markt. Wir können ihn in jeder beliebigen Größe, Form oder Tiefe bauen. Er kann platzsparend als versenkter Pool gebaut oder auf dem Boden gebaut werden. Wir können den Pool sogar halb versenken um so einen Bereich

zu schaffen, in dem Patienten unter Wasser durch große Fenster beobachtet werden können. Wir können das modulare Becken auch mit unserem beweglichen Beckenboden ausstatten. Dies verbessert die Behandlungsmöglichkeiten für den Therapeuten erheblich, da er nun die Tiefe den Bedürfnissen des Patienten anpassen kann.


Wir bieten einige Optionen zur Optimierung des Pools für Patienten und Therapeuten. In jedem Pool kann ein Pooltrack-Unterwasserlaufband installiert werden, das Gehübungen mit variabler Geschwindigkeit ermöglicht. Wir können Jet-Streams, Gegenströme, Fenster, Laminar-Flow-Units, Sprudelpfannen, Unterwasserleuchten und Kameras in den Wänden des Pools integrieren, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten für die Hydrotherapie erheblich erweitert werden.

Hygienisch

Unser modulares Therapie-Pool-System erfüllt die strengsten Vorschriften für die Wasserhygiene. Dies wurde durch die Durchführung eines Farbstofftest gemäß der europäischen Norm EN 15288: 2008, Anhang A mehrmals überprüft. Im Endeffekt bedeutet dies, dass das Wasser ordnungsgemäß



durch das Wasseraufbereitungssystem desinfiziert wird und es keine toten Winkel im Pool gibt, in denen das Wasser nicht ausreichend zirkuliert. Da Bakterien nicht gut am Edelstahl haften, bietet der modulare Pool die bestmögliche Hygieneleistung auf dem Markt.

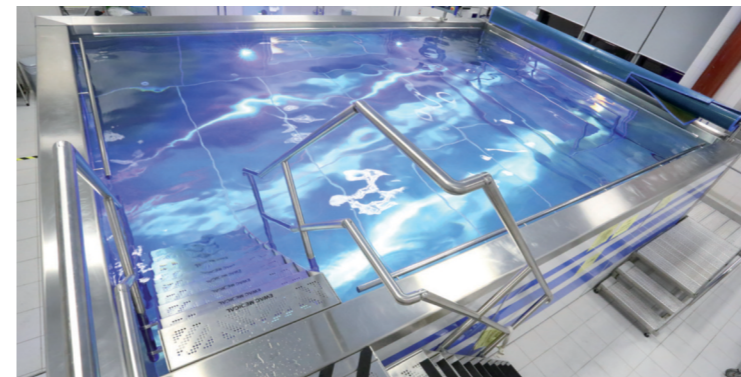

Sicher

Alle Paneele und Funktionen des modularen Pools haben abgerundete Kanten und sind gemäß der europäischen Norm EN 15288 konstruiert. Ein EWAC Medical Modular-Pool bietet hochmoderne Leistung, wenn es darum geht, eine sichere Trainingsumgebung für Therapeuten und Patienten zu schaffen.

Einfache Wartung

Unser modularer Therapie Pool ist als System nahezu wartungsfrei. Wie bei jedem anderen Pool ist nur ein Reinigen des Poolbodens erforderlich, um ein hohes Maß an Sauberkeit zu gewährleisten. Wenn die Außenflächen von Zeit zu Zeit abgewischt werden, hält der Pool jahrzehntelang.

Umweltfreundlich

Wir verwenden mehr als 80% recycelbare Materialien um die Umweltbelastung unseres Planeten zu so gering wie möglich zu halten.

Zubehör

Ein modularer Therapie Pool verfügt über eine Reihe nützlicher Zubehörteile, die die Rehabilitation des Patienten beschleunigen und dem Therapeuten Optionen bieten, um den Rehabilitationsfortschritt wie auch den Spaß daran zu steigern.

Ändern Sie den Pool auf eine beliebige Tiefe

• Mit unserem verstellbaren Wassergymnastikboden kann der Pool je nach Therapeut und Patient in seiner Tiefe angepasst werden
• Unser beweglicher Poolboden ist der vielseitigste Poolboden auf dem Markt und kann mit einem integrierten Pooltrack®-Unterwasserlaufband ausgestattet werden

Übungszubehör

- Pooltrack® Unterwasserlaufband
- Unterwasserfahrrad
- Hindernisstrecke
- Abnehmbare Parallelstangen
- Handläufe

Sichtbarkeitszubehör

- Unterwasserkameras mit Computer zum Anzeigen und Aufnehmen von bewegten Bildern
- Unterwasserleuchten (ein- oder mehrfarbig)
- Beobachtungsfenster, um die Unterwasserbewegungen des Patienten zu verfolgen und zu korrigieren

Optionen für den Poolzugriff

- Treppen innerhalb und außerhalb des Pools
- Selbstanpassende Treppe (bei beweglichem Boden)

Zubehör für die Patientenbehandlung:

- Sitzheber
- Poolheber
- Deckenaufzug
- Mobiler Rollstuhl
- Trage / Wagen



EWAC Medical is Lloyd's Register Quality certified according to ISO 9001 and ISO 13485. EWAC Medical has the privilege to design, manufacture and test Class I Medical products according to the European Medical Device Directive.

EWAC Medical is certified according to:

ISO 9001

ISO 13485

by Lloyd's Register Nederland

