

BICICLETA SUBACUÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EWAC

MEDICAL

We get you moving



Descripción

La Aquabike está especialmente diseñada para su uso en centros de rehabilitación. El cuadro está fabricado en acero inoxidable pulido AISI 316, por lo que es apto para su uso en piscinas. En la parte delantera se montan 2 ruedas para facilitar la reubicación y el desplazamiento de la bicicleta dentro de la piscina. Las bielas están equipadas con 2 pedales que incluyen una correa de fijación. La resistencia se consigue con una turbina. El sillín es ajustable en altura. La Aquabike sólo puede utilizarse en el agua y no en el exterior.

Función


Para realizar ejercicios de ciclismo estacionario en un lugar fijo de la piscina con fines de rehabilitación o entrenamiento. Está equipada con un mecanismo de resistencia único, que hace que la resistencia aumente exponencialmente con la velocidad de pedaleo. El mecanismo de resistencia único se asemeja mucho a las condiciones reales del ciclismo. El aumento de la velocidad requiere un esfuerzo considerable. Al reducir la velocidad, la inercia da la sensación de que la bicicleta sigue avanzando. La resistencia aumenta exponencialmente con la velocidad. Tanto el sillín como las correas de seguridad de las palas pueden ajustarse según las necesidades del usuario.

Opciones

No aplicable

Características del producto

1. Soporte para las manos
2. Silla de montar
3. Turbina
4. Pedal
5. Rueda

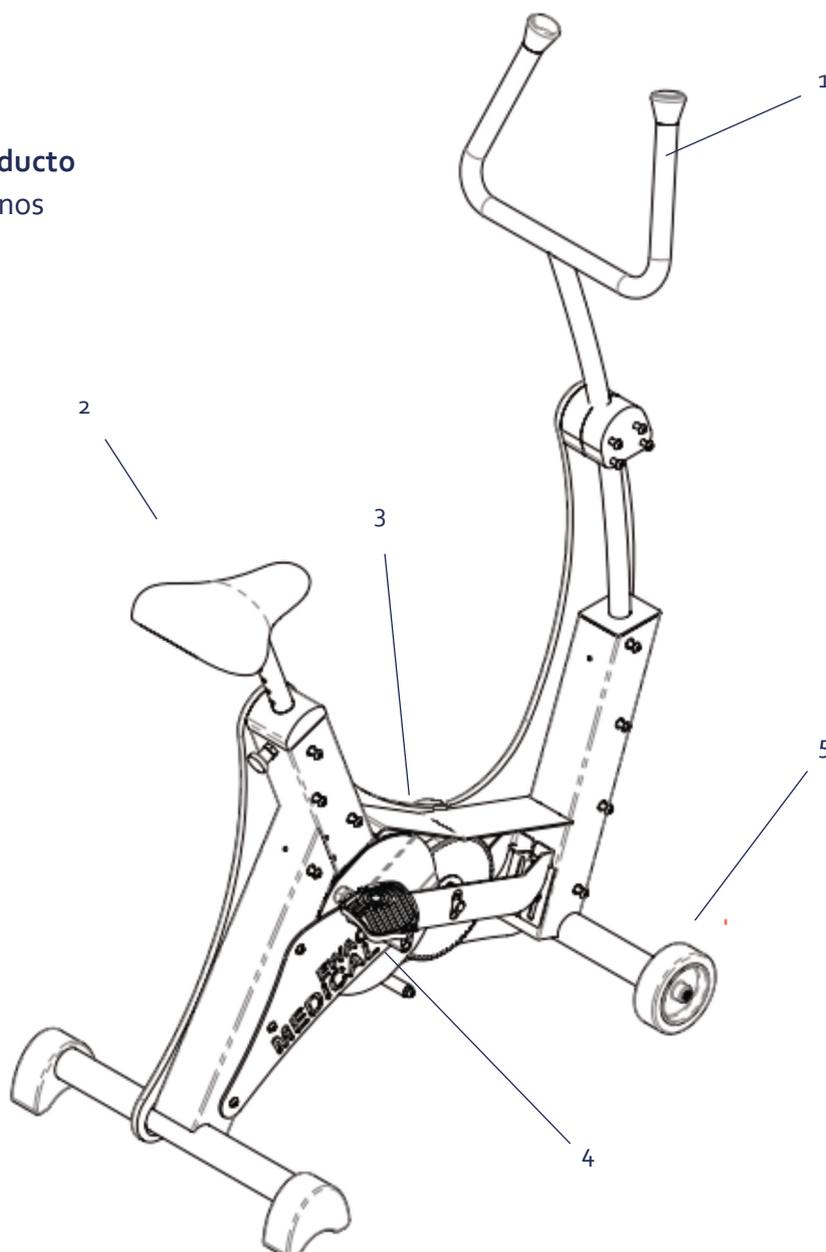

Información técnica

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Altura total de la parte delantera: | 1500 mm |
| Altura total del sillín: | de 785 a 950 mm |
| Anchura | 550 mm |
| Longitud: | 1000 mm |
| Peso: | 35 kg |

Información sobre el embalaje

| | |
|-----------|----------------|
| Material: | Caja de madera |
| Anchura: | 850 mm |
| Longitud: | 850 mm |
| Altura: | 165 mm |
| Peso: | 70 kg |



EWAC Medical está certificado según:

ISO 9001

ISO 13485

de Lloyd's Register Holanda



EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands



+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com